

HABLEMOS DE  
BERDON


## RECOMENDACIÓN DE SUMINISTROS

Entiendo que cada uno de nuestros hijos es diferente, aquí solo comparto algunos de los productos con los que me he acomodado y me funcionan muy bien. Llevo alrededor de 10 años intentándolo todo...yo se que tú también, deseo que estas recomendaciones, puedan hacer tu vida más fácil.

Visita Nuestro Blog:


[www.hablemosdeberdon.com](http://www.hablemosdeberdon.com)

NOMBRE Y REFERENCIA	EXPERIENCIA	IMAGEN
<p>CONVATEC Barrera de la Piel o "Galleta"</p> <p>Referencia:</p> <p>404593 SQU404593 SUR-FIT Natura Durahesive Moldable Convex</p>	<p>Pude lograr muy buen resultado combinando estas dos marcas. La duración es de aproximadamente 7 días con la barrera y la bolsa que es la parte externa o pouch, cada dos o tres días.</p> <p>Caja por 10 unidades</p>	
<p>Bolsa de Ostomía marca Hollister</p> <p>Referencia:</p> <p>Hollister 18192</p> <p>Tamaño: 44 milímetros ó 1-3/4 pulgadas</p>	<p>Permite ver el contenido: textura, cantidad y la calidad de los desechos.</p> <p>Ejemplo: Puedo ver que mi hija no digiere bien las zanahorias, en la bolsa puedo ver pedazos pequeños. Y las cáscaras de los arándanos.</p> <p>Caja por 10 unidades</p>	

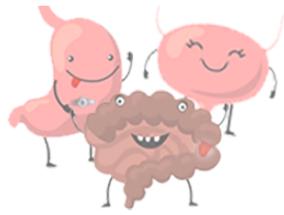


HABLEMOS DE  
BERDON

<p>Spray removedor de adhesivos</p> <p>Marca Convatec</p> <p>Referencia: 420787</p>	<p>Excelente para remover la barra de la piel o galleta y también el adhesivo de la línea central o Piccline.</p> <p>Se aplica de a poco y se va jalando con cuidado hasta remover completamente.</p> <p>No maltrata la piel.</p>	
<p>Spray removedor de adhesivos</p> <p>Marca: Hollister</p> <p>Referencia: 7737</p>	<p>Excelente para remover la barra de la piel o galleta y también el adhesivo de la línea central o Piccline.</p> <p>Se aplica de a poco y se va jalando con cuidado hasta remover completamente.</p> <p>No maltrata la piel.</p>	

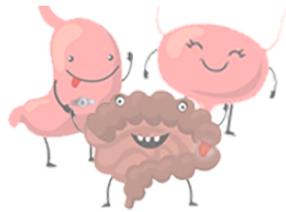


HABLEMOS DE  
BERDON

<p>Polvo para estoma</p> <p>Marca Hollister</p> <p>Referencia</p>	<p>Cuando hay filtraciones y quemaduras por la popó, este polvo aplicado a las heridas solo en la parte exterior, es excelente para sanar.</p> <p>Aplicar sobre la piel, retirar el exceso y poner la galleta.</p>	
<p>Spray protector para el área externa alrededor del estoma.</p> <p>Marca: Medline</p> <p>Referencia:</p>	<p>Excelente spray, crea una barrera protectora alrededor del estoma. Seca rápido.</p> <p>Nota:</p> <p>Hay muchas marcas de estos sprays, escoja el que más se ajuste a tus necesidades y/o al que tu seguro te apruebe.</p>	
<p>Medline Sureprep No-Sting Skin Protectant Wipes</p> <p>Pañitos protectores para el área externa alrededor del estoma.</p>	<p>Excelentes paños, crean una barrera protectora alrededor del estoma. Seca rápido.</p> <p>Nota: Hay muchas marcas de estos pañitos, escoge el que más se ajuste a tus necesidades y/o al que tu seguro te apruebe.</p>	

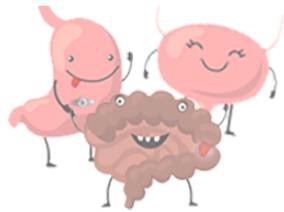

HABLEMOS DE  
BERDON

<p>Adhesivo transparente protector para sellar la galleta o barrera de la piel</p>	<p>Este adhesivo me permite sellar la parte de la barrera de la piel o galleta para más protección y evitar accidentes.</p> <p>Ver demostración el vídeo de Youtube:</p> <p><a href="#">▶ Bolsita Parte 2.</a></p>	
<p>Bolsa de descompresión</p> <p>FARRELL Valve Bag Pressure Relief System</p>	<p>Esta bolsa te permite descomprimir la pancita de tu hijo, puedes sacar líquidos y gases.</p> <p>Ayuda a aliviar la presión.</p> <p>Nota: En mi experiencia, puedes quitarla cuando esté en 400 para que no haya riesgo de deshidratación.</p> <p>Conéctala al tubo de alimentación o gastrostomía y ponla en el piso y deja que todo salga por gravedad.</p>	
<p>Kit de Gastrostomia o "botón"</p> <p>Marca: Avanos MIC-KEY</p> <p>AVANOS 0120-18-5.0 MIC-KEY* Gastrostomy Feeding Tube Kit</p>	<p>Esta marca me ha funcionado muy bien, probé mini-one y no me fue tan bien.</p> <p><b>Recomendación:</b> Si con el tiempo empieza a salir líquido, puedes poder una gasa entre la piel y el botón. Pero evalúa si tu hijo ha crecido o si se ha alargado más el orificio del G-tube, entonces considera probar unos más largo o más ancho.</p> <p>También puedes agregar 1 cm de agua a la burbuja.</p>	

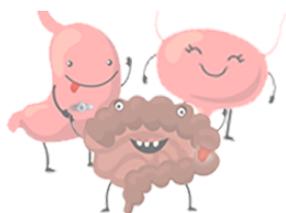

## HABLEMOS DE BERDON

	<p>Si la burbuja se revienta por alguna razón, <b>NO SAQUES</b> el botón, o sea, no dejes el orificio sin nada, este puede cerrarse si lo dejas así demasiado tiempo. No más de 10 minutos.</p> <p>Mantén siempre un kit extra, ó puedes poner cinta adhesiva sobre el botón reventado sujetandolo contra el abdomen mientras llegas a la sala de emergencias.</p>	
<p>Kit de sistema de catéter intermitente Advance Plus™</p> <p>Advance Plus™ Intermittent Catheter System Kit</p>	<p>Este Kit es muy completo, trae desinfectante, guantes estériles y la bolsa transparente que te permite ver la textura, el color y además es fácil de abrir y puedes oler la orina para detectar posibles infecciones. Además puedes medir la cantidad de orina y así tener un control más preciso.</p>	

HABLEMOS DE  
BERDON